



Pour le patient

Instructions de prélèvement

Détecter le sang dans les selles

Instructions de prélèvement pour le patient

Test pour détecter le sang dans les selles

Important avant de commencer

- Le test sert à déterminer s'il y a des traces (invisibles) de sang dans les selles, provenant du tractus gastro-intestinal.
- **Ne faites pas** le test **pendant vos menstruations** ou si vous avez **des saignements d'hémorroïdes**.
- Les selles **ne doivent pas être contaminées par l'urine ou l'eau** des toilettes




Vérifiez la date d'expiration précisée sur votre test. Demandez un nouveau test si la date de péremption a été dépassée. Inscrivez votre **nom** sur l'étiquette du tube ou y apposez **une vignette de mutualité**.



Récoutez vos selles à l'aide du **dispositif de collecte des selles** (Faeces Collection Device). Pour ce faire, suivez les instructions sur le papier.



Prenez le test et ouvrez-le en tournant la partie verte.

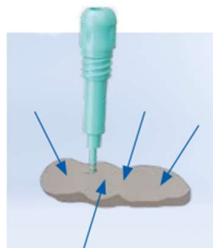

Piquez le bout de la tige verte de prélèvement 4 fois dans vos selles comme illustré.



Couvrez complètement les rainures de la tige, sans excès.



Remplacez la tige dans le tube et serrez fermement le bouchon vert.



Mettez votre test dans le sachet de protection.

Apportez l'échantillon à votre laboratoire ou chez votre médecin dès que possible.

Après fermeture, n'ouvrez plus le test.

Gardez le sachet dans le réfrigérateur (max. 7 jours)